


## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MASSAGE CHÂN SPA MAX-641**



Cảm ơn khách hàng đã chọn mua sản phẩm massage chân Spa Max-641. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để có thể vận hành đúng cách, cho hiệu quả tối đa.

## PHÂN BỐ CỦA CÁC HUYỆT VỊ TRÊN LÒNG BÀN CHÂN

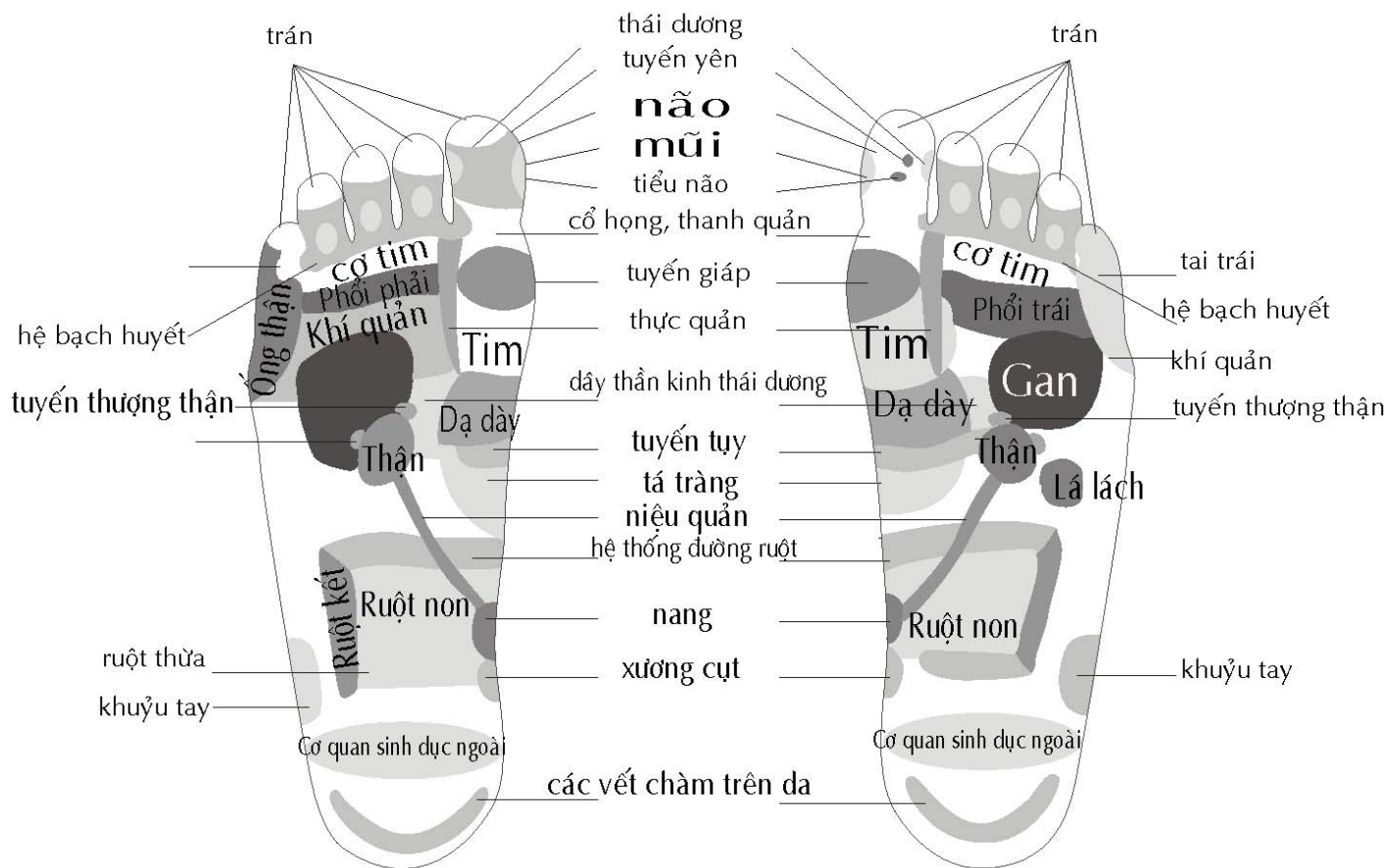

## CÁC CHƯƠNG TRÌNH MASSAGE

1. Massage spa kết hợp nhiệt, sỏi bong bóng và kích thích hồng ngoại.  
Đổ nước ấm vào khoang chứa, vận công tắc chuyển sang vị trí "1". Máy sẽ kích hoạt bộ làm ấm nước và bơm khí bắt đầu hoạt động, tạo các sỏi bong bóng, cho cảm giác được massage rất dễ chịu. Bên cạnh đó, các đèn hồng ngoại giúp tăng hiệu quả massage, kích thích quá trình bài tiết, thải loại các chất độc, chất dư thừa một cách tự nhiên, giúp ngủ ngon và tăng cường lưu thông máu.
2. Massage nhiệt kết hợp sỏi bong bóng.  
Chuyển công tắc sang vị trí "2". Máy sẽ thực hiện massage spa bằng các sỏi bong bóng kết hợp với làm ấm.
3. Kích thích hồng ngoại.  
Chuyển công tắc sang vị trí "3". Máy sẽ chỉ khởi động đèn hồng ngoại. Kích thích hồng ngoại giúp tăng cường lưu thông máu, dẫn cơ, làm ấm cơ thể, kích thích bài tiết, giúp ngủ ngon.

Massage chân spa Max-641 được thiết kế kèm theo bộ phận làm ấm nước, và nó làm thay đổi nhiệt độ theo thời gian (bảng dưới đây). Người sử dụng hãy lựa chọn nhiệt độ nước sao cho cảm thấy thoải mái nhất.

Massage chân spa Max-641 Công suất: 380W Điện áp: 220V, 50Hz	Thời gian (phút)	Nhiệt độ nước (°C)
		Khởi động
	10	26 °C
	20	35 °C
	30	43 °C
	40	45 °C
	50	47 °C
	60	48 °C


### CÁC BỘ PHẬN VÀ CHỨC NĂNG

**0:** Tắt


**1:** Massage nhiệt kết hợp sỏi bong bóng và kích thích hồng ngoại

**2:** Massage nhiệt kết hợp sỏi bong bóng


**3:** Kích thích hồng ngoại

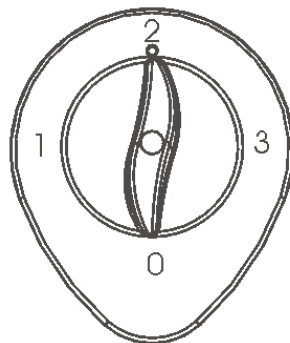

**Công tắc chuyển chương trình làm việc**

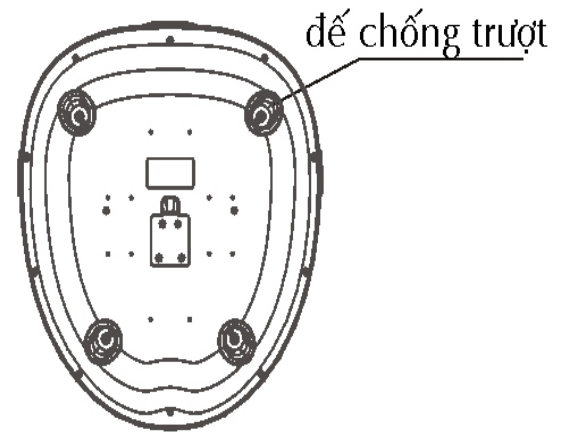


**Mặt dưới của máy**

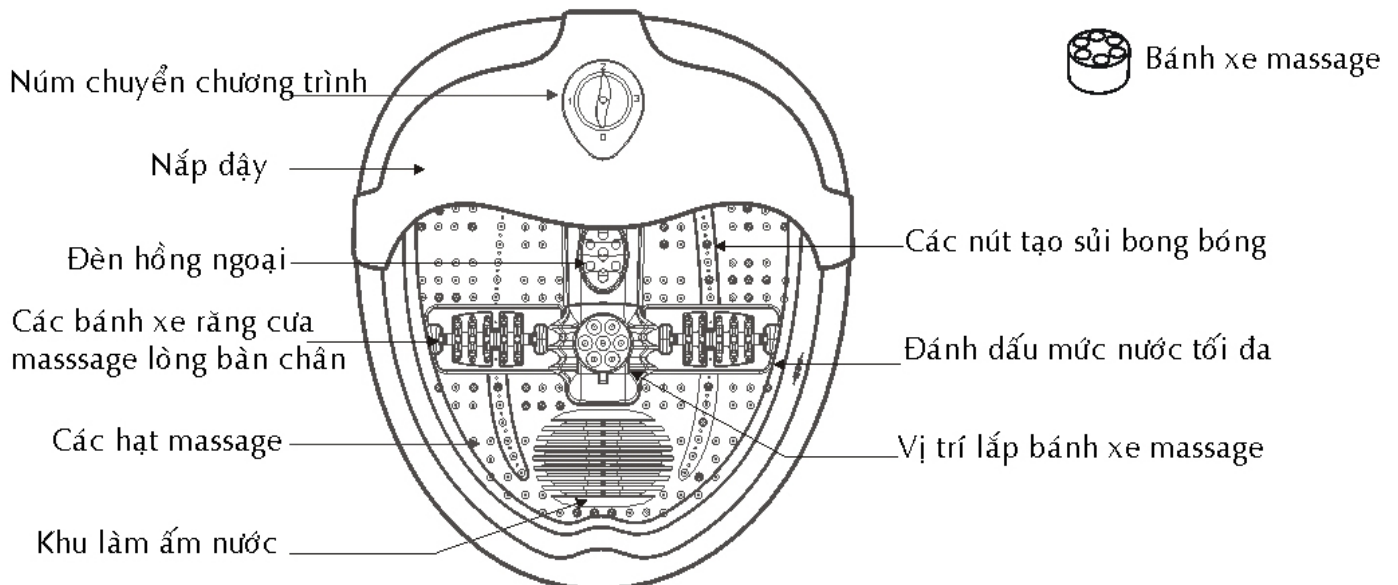


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Khi sử dụng, phải luôn đổ nước vào bồn, và chỉ đến mức tối đa đã được đánh dấu trên máy. Vào mùa Đông có thể đổ trực tiếp nước ấm (khoảng 38<sup>0</sup>C) và sử dụng ngay.
2. Luôn đặt máy cân bằng theo phương nằm ngang và cắm điện nguồn 220V 50Hz cho máy.
3. Sản phẩm đã được nghiên cứu dựa trên cấu tạo và sự phân bố của các huyết vị trên lòng bàn chân, được thiết kế với các chương trình massage spa khác nhau cho người sử dụng lựa chọn như massage với nước nóng, massage bằng các túi bong bóng li ti tạo cảm giác hoàn toàn thư giãn. Bên cạnh đó, chương trình kích thích hồng ngoại còn giúp tăng cường lưu thông máu, giúp ngủ ngon, tăng cường sức khỏe.
4. Người sử dụng có thể tùy ý lựa chọn chương trình massage sao cho thoải mái nhất.

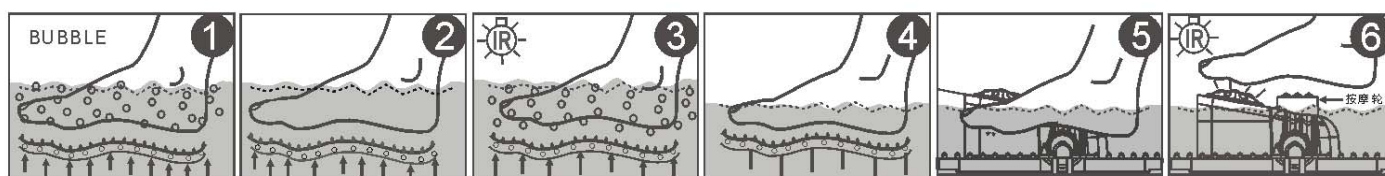


- Massage với túi bong bóng nước nóng (chương trình 1&2): Max-641 được thiết kế kèm theo chức năng làm ấm nước, giúp luôn giữ được độ ấm cần thiết, tạo cảm giác thoải mái. Mặt khác, ở chương trình này, máy còn tạo ra vô số các túi bong bóng, các túi bong bóng này như vô vàn các hạt massage nhỏ li ti tác động, xoa bóp đến các huyết đạo dưới lòng bàn chân.
- Các răng cưa massage được gắn dưới đáy bồn chứa (hình 5), tác động mạnh đến toàn bộ các huyết vị, giúp giãn cơ, giải tỏa stress.
- Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng kết hợp bánh xe massage với đèn hồng ngoại (hình 6).

## CÁC BƯỚC VẬN HÀNH

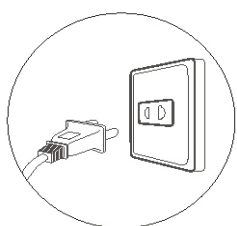


**1**

Cắm đúng điện  
nguồn cho máy

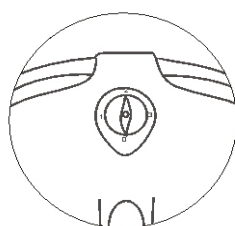

**2**




Lựa chọn chương  
trình massage

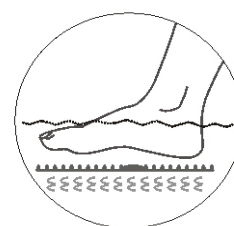

**3**

...và thư giãn

## ĐỔ NƯỚC ĐÚNG CÁCH

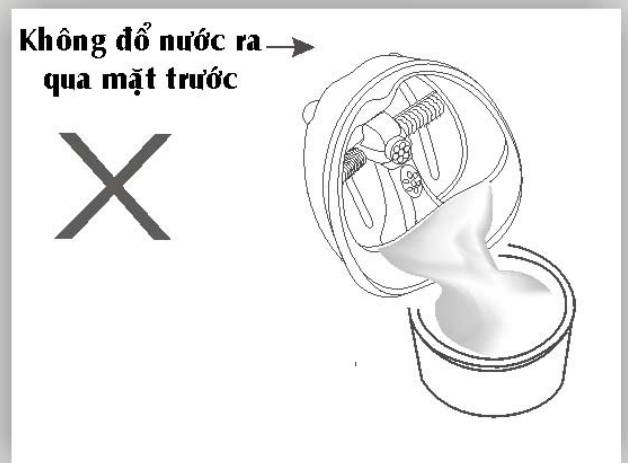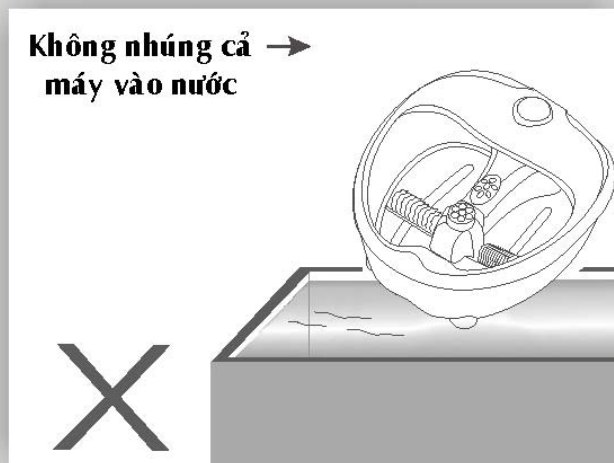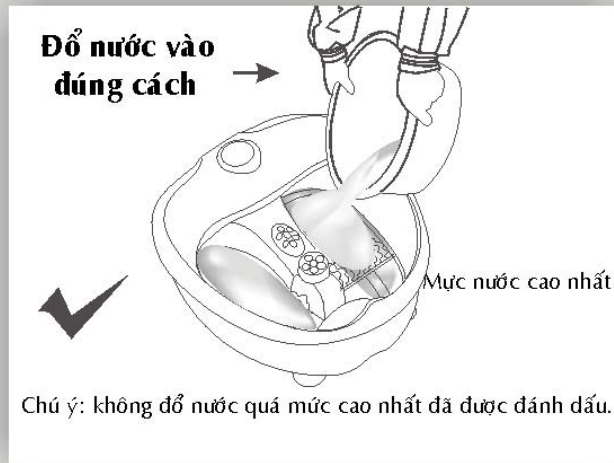







## LAU CHÙI VÀ BẢO QUẢN

- Sau khi sử dụng, chỉ cần làm sạch các bộ phận bị nhúng trong nước, không được đưa cả máy vào trong bồn nước để lau rửa. Nếu muốn vệ sinh toàn bộ máy, có thể dùng khăn vải mềm, sạch đã được làm ẩm.
- Sau khi sử dụng, phải đổ nước bẩn ra đúng cách như đã hướng dẫn ở trên.
- Nên lau chùi máy ngay sau khi sử dụng xong.
- Sau khi sử dụng, để tránh các sự cố, nên rút điện nguồn và bảo quản nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát.
- Phải lau chùi sạch sẽ các lỗ tạo bọt khí, nếu không để lâu ngày có thể dẫn đến máy không còn khả năng tạo các sủi bong bóng nước.

## CHÚ Ý

1. Trước khi sử dụng, nên kiểm tra xem máy có thẳng bằng không.
2. Trước khi sử dụng, kiểm tra sự an toàn của máy, xem có bị hở dây điện không.
3. Luôn tắt máy và rút nguồn điện cung cấp cho máy sau khi sử dụng.
4. Dừng ngay việc sử dụng máy nếu thấy trong người có hiện tượng bất thường.
5. Không sử dụng máy cho những người có tiền sử bệnh tim mạch, các bệnh về máu, bị gãy xương bàn chân, phụ nữ có thai, hoặc những người đang bị đau ốm.
6. Trẻ em, người tàn tật khi sử dụng máy phải có sự giám sát của người lớn.
7. Chỉ sử dụng trước hoặc sau bữa ăn tối thiểu 30 phút. Thời gian mỗi lần tốt nhất chỉ nên từ 20 – 25 phút.
8. Không được hòa thêm Axit hay các dung dịch nguy hại nào khác vào nước khi sử dụng.
9. Không chìm máy vào trong nước hoặc sử dụng ở những nơi ẩm ướt, dễ cháy nổ.
10. Trong khi sử dụng, không được ngủ hoặc ngủ gật.
11. Những người bị bệnh nhạy cảm với nhiệt phải đặc biệt lưu ý khi sử dụng sản phẩm.

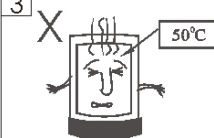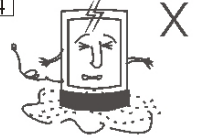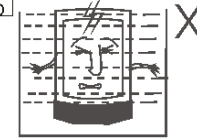1		2		3		4		5		6	
	Không đặt các vật nặng hoặc đứng lên máy		Không dùng dây nguồn để lôi, kéo máy		Không đổ nước có nhiệt độ trên 50 độ vào khoang chứa		Sau khi sử dụng phải rút điện nguồn, sau đó mới được lau chùi máy để tránh bị shock điện		Không ngâm cả máy vào trong nước		Trong khi sử dụng hoặc đổ nước, không được lật máy lên

## MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP

Lỗi	Nguyên nhân	Xử trí
Máy không hoạt động	Chưa bật máy	Bật máy
	Phích cắm điện nguồn chưa được cắm chắc chắn	Kiểm tra ổ cắm và phích cắm điện nguồn
Âm thanh phát ra quá lớn	Máy sử dụng liên tục trong một thời gian quá dài	Dừng máy và sử dụng lại sau 30 phút.
Máy tự nhiên bị dừng trong khi sử dụng	Người sử dụng tì chân quá mạnh, gây quá tải	Hãy nói lỏng lực tì lên máy
	Bộ phận bảo vệ tự động dừng khi máy sử dụng liên tục quá lâu.	Tắt điện nguồn và sử dụng lại sau 30 phút.