



Thiết bị massage – Thiết bị y tế gia đình



Thoải mái thư giãn



Di chuyển nhẹ nhàng



Gấp gọn dễ dàng



Trở thành công cụ hữu ích

inada CUBE
FML-3000D

GHẾ MASSAGE GẤP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG

Hà Nội: 366 Xã Đàn (Kim Liên mới) - Đống Đa

Đà Nẵng: 244 - Núi Thành - Hải Châu

HCM: 272 Đường 3/2, P.12, Q.10

ĐT: 04 3573 8311/12


ĐT: 0511 362 3788

ĐT: 08 3862 7591


Website: www.maxcare.co.jp

www.maxcare.com.vn

CÁC BỘ PHẬN VÀ CHỨC NĂNG

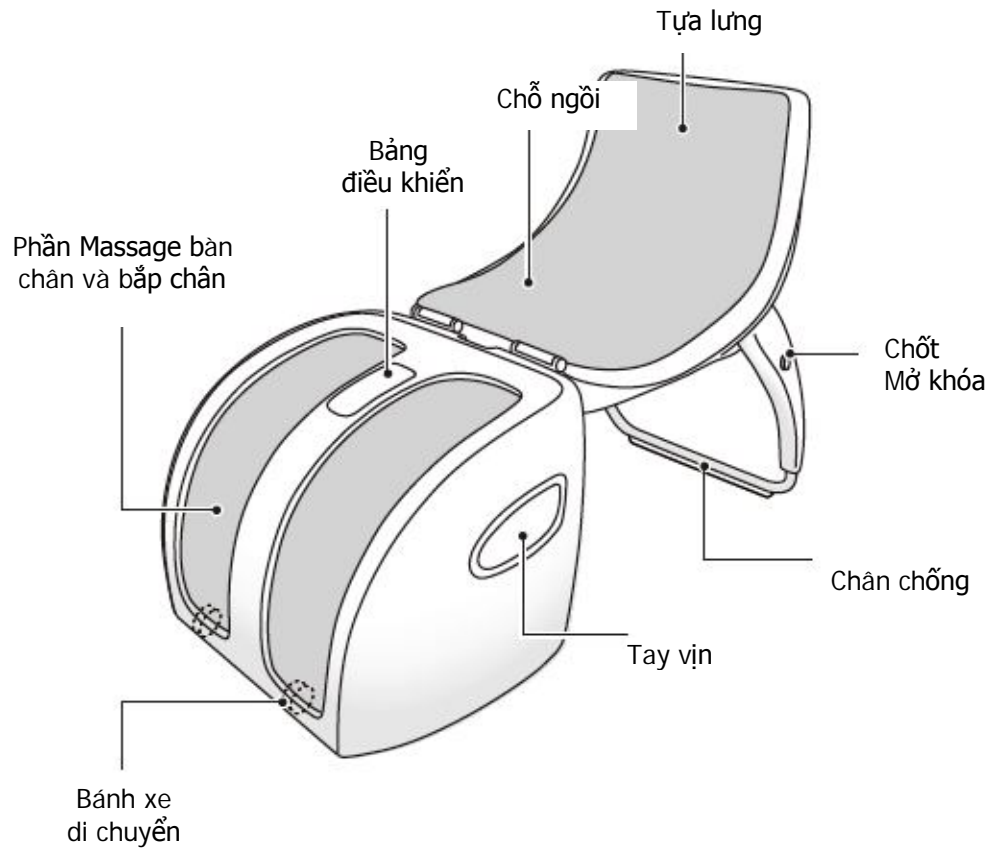

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

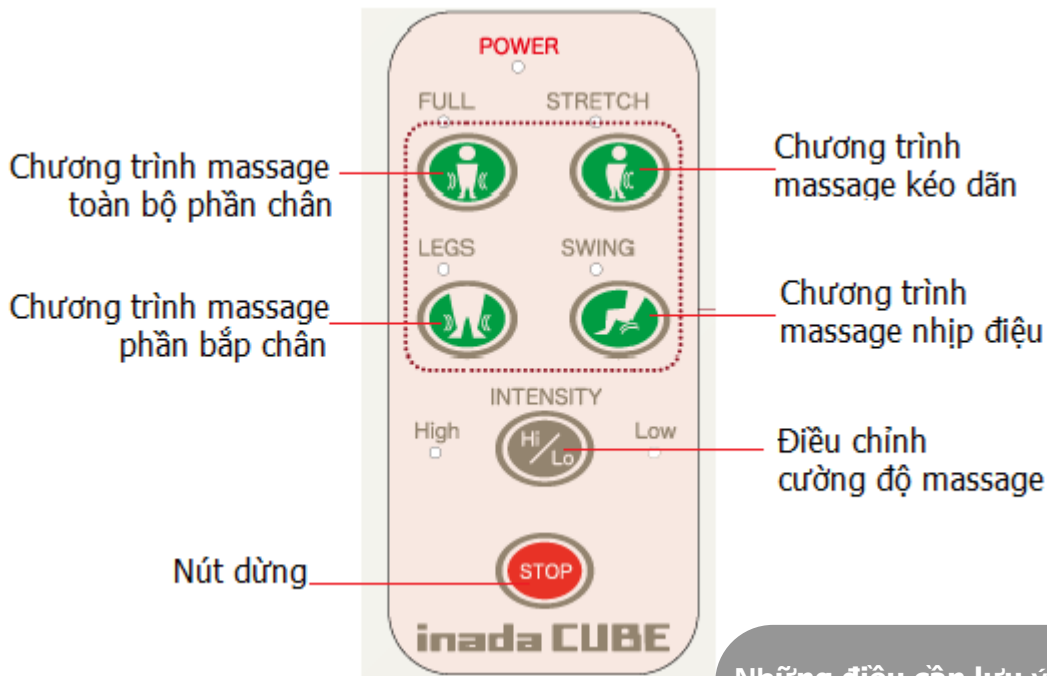

Những điều cần lưu ý khi dùng bộ điều khiển này

- Không ngồi hoặc đặt vật nặng lên điều khiển;
- Không sử dụng điều khiển bằng tay ướt;
- Không sử dụng những vật sắc nhọn hoặc vật cứng để bấm điều khiển.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CUBE cung cấp 4 chương trình massage hoàn hảo tập trung vào thắt lưng, hông, mông, bắp chân và bàn chân. Người sử dụng chỉ cần nhấn nút để lựa chọn, nhấn lần nữa để kết thúc chương trình.



FULL

Chương trình massage toàn thân

Massage từ thắt lưng đến lòng bàn chân.



STRETCH

Chương trình massage kéo giãn

Tập trung vào việc kéo giãn thắt lưng, hông và mông.



LEGS

Chương trình massage chân

Chương trình massage này tập trung vào massage vùng hông, bắp chân và bàn chân.



SWING

Chương trình nhịp điệu

Giúp thư giãn toàn bộ vùng hông và xương chậu

Các nút điều chỉnh



STOP

Nút STOP

Nhấn nút STOP để dừng chương trình massage



INTENSITY

Điều chỉnh cường độ

Điều chỉnh cường độ bằng cách ấn nút "High/Low." Ghế được mặc định ở chế độ "Low".

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP

Hiện tượng	Nguyên nhân
Tiếng ồn trong khi vận hành, gây ra bởi: . Âm thanh của máy bơm không khí. . Âm thanh của đệm massage không khí.	Những tiếng ồn này là bình thường trong sự vận hành các bộ phận của ghế và không ảnh hưởng đến hiệu quả của nó.
Các nút trong bảng điều khiển không hoạt động.	. Kiểm tra xem phích cắm điện có được cắm chặt trong ổ cắm trên tường không. . Kiểm tra xem công tắc nguồn ở phía sau của ghế ở vị trí ON chưa.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	INADA CUBE FML-3000A
Điện áp sử dụng	AC 220V
Công suất tiêu thụ	40W
Thời gian massage	15 phút

MỘT SỐ LƯU Ý

Môi trường sử dụng

- Không đặt ghế ngoài trời. Không đặt ghế trong phòng có nhiệt độ cao hơn 40°C.
- Không sử dụng ghế ở những nơi có vòi phun nước, có độ ẩm cao, bụi bẩn hoặc những nơi đang cấp phát khí Oxy.
- Không đặt ghế gần những nguồn phát nhiệt, lò sưởi hoặc dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Đặt ghế ở những nơi khô ráo, thoáng mát và không nên thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột. Nếu di chuyển ghế từ phòng lạnh sang phòng có nhiệt độ ấm hơn thì sau một giờ hãy sử dụng ghế.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

Các lưu ý khi bảo hành sản phẩm

- . Khi mang sản phẩm đến bảo hành, khách hàng phải có phiếu bảo hành, tem bảo hành hoặc các giấy tờ có liên quan còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, sửa đổi và phải còn đầy đủ.
- . Không bảo hành đối với một số phụ kiện đặc biệt: ổ usb, bề mặt bằng da, dây cắm điện nguồn.
- . Sản phẩm sẽ không được bảo hành nếu sử dụng không đúng quy cách, bất cẩn, để các vật sắc nhọn (dao, kéo, ...) hoặc chất lỏng rơi vào sản phẩm. Lỗi do người sử dụng gây nên như: chập cháy hay dùng quá tải, thiên tai, hỏa hoạn, quá công suất do nhà sản xuất quy định.
- . Sản phẩm đã bị thay đổi, sửa chữa hoặc sử dụng không đúng mục đích. Sản phẩm được lắp đặt, bảo hành và bảo trì không theo đúng chỉ dẫn của Maxcare.

Showroom và các Trung tâm bảo hành Maxcare

Hotline hỗ trợ kĩ thuật **0978 225 999**

Miền Bắc

Hà Nội: 366 Xã Đàn (Kim Liên mới) - Đống Đa – ĐT: 04 3573 8311/12

Hải Dương: 40 Đại lộ Hồ Chí Minh - TP Hải Dương

Hải Phòng: 40 Nguyễn Bình Khiêm - Ngô Quyền

Quảng Ninh: 172A Nguyễn Văn Cừ - Tp Hạ Long

Miền Trung

Nghệ An: 95 Lê Hồng Phong -Tp. Vinh - Nghệ An

Đà Nẵng: 244-Núi Thành-Hải Châu - ĐT: 0511 362 3788

Bình Định: 168 Lê Hồng Phong - Tp. Quy Nhơn

Miền Nam

Hồ Chí Minh: 272 Đường 3/2 - P.12 - Q.10 - ĐT: 08 3862 7591



Thiết bị massage–Thiết bị y tế gia đình

Nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC
Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG

Website:

www.maxcare.co.jp

www.maxcare.com.vn

Sứ mệnh của chúng tôi là

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỨC KHỎE BẠN

Maxcare là thương hiệu được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam bởi tập đoàn Y tế Phương Đông.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị Y tế cho Bệnh viện đầu ngành trên khắp cả nước, Maxcare hiểu sự cần thiết của việc chăm sóc sức khỏe tại nhà. Với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại nhà - thiết bị Y tế và thiết bị Massage của các hãng danh tiếng trên thế giới: Maxcare, Citizen, Tanita, Arkray – Nhật Bản, Mobicool – Thụy Điển, Maxcare mang đến sự chăm sóc Y tế tại nhà và tạo ra không gian riêng thư giãn cho quý khách hàng.

